

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

FLEX GOLD NP 24°



PROJETADO PARA ALCANÇAR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA EM
TODAS AS DENSIDADES ÓSSEAS: MAXILA E MANDÍBULA

Short - 977004
Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Cone morse 24°
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 1.6

Roscas duplas compactantes progressivas


- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo

- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração

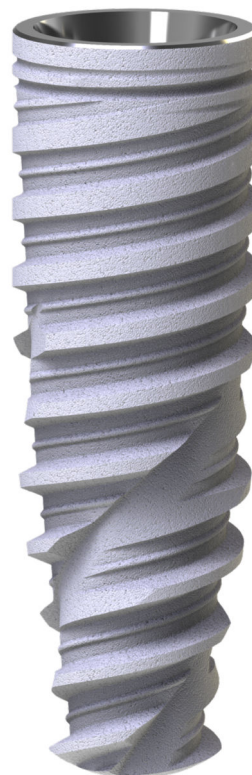

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.3	Ø 5.0
524385 - 3,5x8,5	524785 - 3,75x8,5	538485 - 4,3x8,5	524585 - 5,0x8,5
524310 - 3,5x10	524710 - 3,75x10	514410 - 4,3x10	524510 - 5,0x10
524311 - 3,5x11,5	524711 - 3,75x11,5	514411 - 4,3x11,5	524511 - 5,0x11,5
524313 - 3,5x13	524713 - 3,75x13	514413 - 4,3x13	524513 - 5,0x13
524315 - 3,5x15	524715 - 3,75x15	514415 - 4,3x15	524515 - 5,0x15

	Soft (III - IV)	Hard* (I - II)	Fresas							Counter*		
Ø 2.9	2.0	2.4										
Ø 3.5	2.8	3.2										
Ø 3.75	3.2	3.4										
Ø 4.3	3.6	3.8										
Ø 5.0	3.8	4.2										

*Countersink opcional para cortical óssea densa.



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

FLASH NP 24°



DESIGN INOVADOR PARA UMA INSERÇÃO RÁPIDA E PRECISA EM MAXILA,
GARANTE EXCELENTE COMPACTAÇÃO ÓSSEA

Short - 977004
Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Colar reduzido para aumentar a espessura óssea na cervical do implante
- Espiras com alto poder de corte
- Angulação Interna: 24°
- Rosca interna M 1.6
- Web® (ampliação do contato ósseo)
- Bioplatform® (tipo switch)

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Preferencialmente maxila

Tratamento de Superfície **Vulcano Actives**



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície **Porous**

Ø 3.5	Ø 4.3	Ø 5.0
547385 - 3,5x8,5	547485 - 4,3x8,5	547585 - 5,0x8,5
547310 - 3,5x10	547410 - 4,3x10	547510 - 5,0x10
547311 - 3,5x11,5	547411 - 4,3x11,5	547511 - 5,0x11,5
547313 - 3,5x13	547413 - 4,3x13	547513 - 5,0x13
547315 - 3,5x15	547415 - 4,3x15	547515 - 5,0x15

Ø 3.5	Ø 4.3	Ø 5.0
527385 - 3,5x8,5	527485 - 4,3x8,5	527585 - 5,0x8,5
527310 - 3,5x10	527410 - 4,3x10	527510 - 5,0x10
527311 - 3,5x11,5	527411 - 4,3x11,5	527511 - 5,0x11,5
527313 - 3,5x13	527413 - 4,3x13	527513 - 5,0x13
527315 - 3,5x15	527415 - 4,3x15	527515 - 5,0x15

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

TORQ NP 24°



Conexão
Digital Implant

IDEALIZADO PARA UMA INSERÇÃO PRECISA EM MAXILA E MANDÍBULA,
GARANTE DISSIPAÇÃO DE FORÇAS CERVICAIS

Short - 977004
Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Micro rosca na parte superior, permite melhor dissipação das forças ao redor do osso cervical
- Espiras com alto poder de corte
- Angulação Interna: 24°
- Rosca interna M 1.6
- Bioplatform® (tipo switch)

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície **Vulcano Actives**

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
545385 - 3,5x8,5	545785 - 3,75x8,5	545285 - 4,0x8,5	545585 - 5,0x8,5
545310 - 3,5x10	545710 - 3,75x10	545210 - 4,0x10	545510 - 5,0x10
545311 - 3,5x11,5	545711 - 3,75x11,5	545211 - 4,0x11,5	
545313 - 3,5x13	545713 - 3,75x13	545213 - 4,0x13	
545315 - 3,5x15	545715 - 3,75x15		

Tratamento de Superfície **Porous**

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
525385 - 3,5x8,5	525785 - 3,75x8,5	525285 - 4,0x8,5	525585 - 5,0x8,5
525310 - 3,5x10	525710 - 3,75x10	525210 - 4,0x10	525510 - 5,0x10
525311 - 3,5x11,5	525711 - 3,75x11,5	525211 - 4,0x11,5	525511 - 5,0x11,5
525313 - 3,5x13	525713 - 3,75x13	525213 - 4,0x13	525513 - 5,0x13
525315 - 3,5x15	525715 - 3,75x15	525215 - 4,0x15	525515 - 5,0x15



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

SHORT NP 24° BLT



IDEALIZADO PARA MANDÍBULA COM ALTURA ÓSSEA LIMITADA

Short - 977004
Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Cone Morse Indexado NP
- Angulação Interna: 24°
- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Implantações preferencialmente múltiplas em posterior de mandíbula
- Nível Ósseo: Bone Level - Altura 7mm
- Nível Tecido Gengival: Tissue Level - Altura 5,5mm
- Pouco osso em altura


Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Torque de Inserção
recomendado

60N.cm

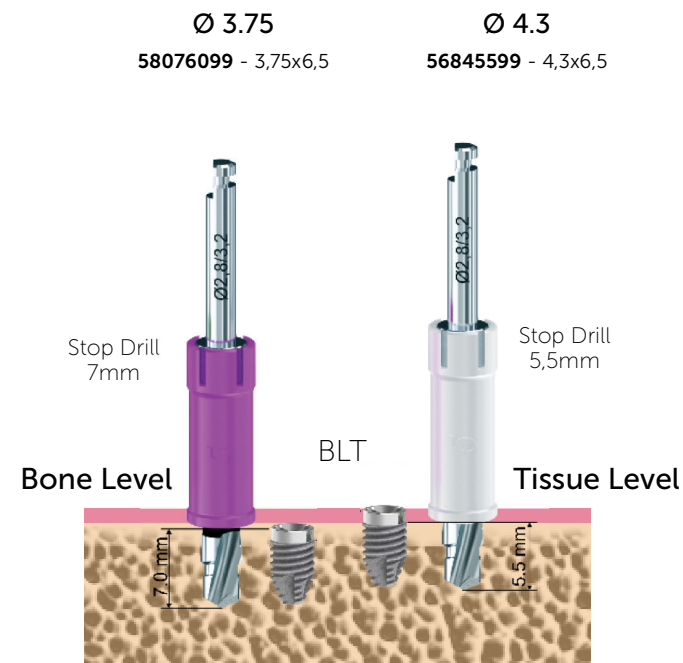

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

PTERY NP 24°



Conexão
Digital Implant

IDEALIZADO PARA MAXILA COM ATROFIA ÓSSEA

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais


- Amplo colar de titânio liso, facilita a interação periodontal- óssea gengival
- Espiras com alto poder de corte
- Angulação Interna: 24°
- Rosca interna M 1.6
- Bioplatform® (tipo switch)

Principais Indicações

- Protocolo convencional e carga imediata
- Preferencialmente maxila

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração

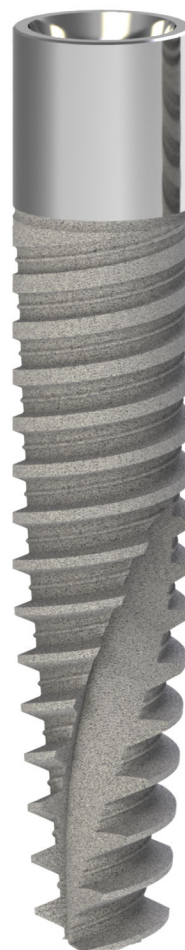

Short - 977004
Long - 977005



Ø 3.5

527318 - 3,5 x 18

527321 - 3,5 x 21


527324 - 3,5 x 24

Ø 3.75

527718 - 3,75 x 18

527721 - 3,75 x 21

527724 - 3,75 x 24

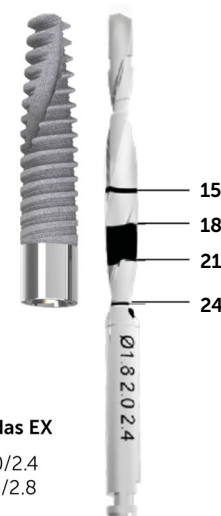

Fresas Escalonadas EX

933409 - 1.8/2.0/2.4

933410 - 1.8/2.4/2.8



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

FLEX GOLD GMF 16°



PROJETADO PARA ALCANÇAR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA EM
TODAS AS DENSIDADES ÓSSEAS: MAXILA E MANDÍBULA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Cone morse 16°
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 1.6

Roscas duplas compactantes progressivas

- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo

- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.3	Ø 5.0
538385 - 3,5x8,5	538785 - 3,75x8,5	525485 - 4,3x8,5	538585 - 5,0x8,5
526310 - 3,5x10	523710 - 3,75x10	526410 - 4,3x10	526510 - 5,0x10
526311 - 3,5x11,5	523711 - 3,75x11,5	526411 - 4,3x11,5	526511 - 5,0x11,5
526313 - 3,5x13	523713 - 3,75x13	526413 - 4,3x13	526513 - 5,0x13
526315 - 3,5x15	523715 - 3,75x15	526415 - 4,3x15	526515 - 5,0x15

	Soft (III - IV)	Hard*	Fresas								Counter*	
Ø 2.9	2.0	2.4										
Ø 3.5	2.8	3.2										
Ø 3.75	3.2	3.4										
Ø 4.3	3.6	3.8										
Ø 5.0	3.8	4.2										

*Countersink opcional para cortical óssea densa.



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

SHORT GMF 16° BLT



IDEALIZADO PARA MANDÍBULA COM ALTURA ÓSSEA LIMITADA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Cone Morse Indexado GMF
- Angulação Interna: 16°
- Macro estrutura Híbrido Cônico
- Câmaras helicoidais autocortantes
- Biplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Implantações preferencialmente múltiplas em posterior de mandíbula
- Nível Ósseo: Bone Level - Altura 7mm
- Nível Tecido Gengival: Tissue Level - Altura 5,5mm
- Pouco osso em altura


Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

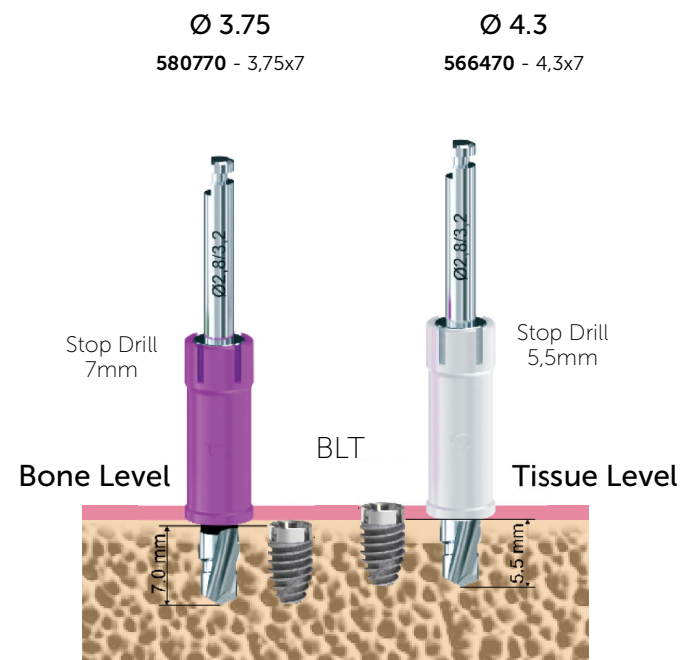

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

LONG GMF 16°



IDEALIZADO PARA MAXILA COM ATROFIA ÓSSEA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Micro rosca na parte superior, permite melhor dissipação das forças ao redor do osso cervical
- Cone morse 16°
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 1.6

Roscas duplas compactantes progressivas

- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo


- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Hard®
Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

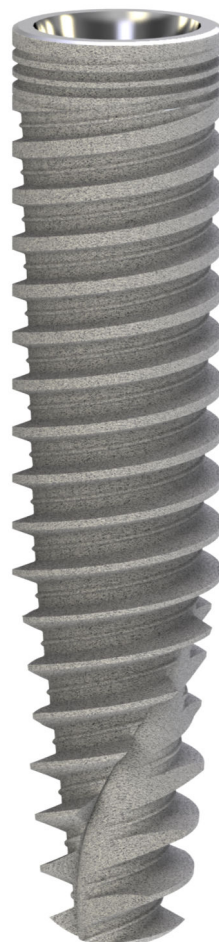

Ø 3.5

538318 - 3,5 x 18

538321 - 3,5 x 21


538324 - 3,5 x 24

Ø 3.75

538718 - 3,75 x 18

538721 - 3,75 x 21

538724 - 3,75 x 24

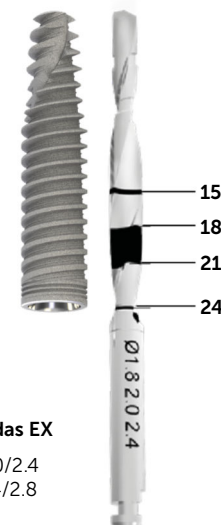

Fresas Escalonadas EX

933409 - 1.8/2.0/2.4

933410 - 1.8/2.4/2.8



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

ZIGOMORSE GMZ 16°



IMPLANTE ZIGOMÁTICO GMZ 16° PARA PARA PROTOCOLO EM MAXILA ATRÓFICA

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Cone Morse 16°
- Corpo Cilíndrico Liso
- Região de rosca apical: Cônico
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Implantação múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação maxila atrófica

Superfície Porous


- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 4.0

504430 - 4.0 x 30
504435 - 4.0 x 35
504440 - 4.0 x 40
504442 - 4.0 x 42.5
504445 - 4.0 x 45
504447 - 4.0 x 47.5
504450 - 4.0 x 50
504455 - 4.0 x 55

Mini Pilar Angulado

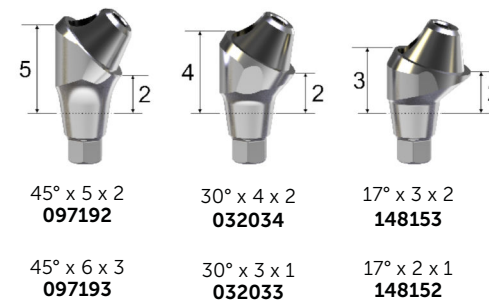

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

FLEX GOLD FIT 11.5°



PROJETADO PARA ALCANÇAR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA EM
TODAS AS DENSIDADES ÓSSEAS: MAXILA E MANDÍBULA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Cone morse 11.5°
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 1.8

Roscas duplas compactantes progressivas

- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo

- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.3	Ø 5.0
539385 - 3,5x8,5	539785 - 3,75x8,5	539485 - 4,3x8,5	539585 - 5,0x8,5
539310 - 3,5x10	539710 - 3,75x10	539410 - 4,3x10	539510 - 5,0x10
539311 - 3,5x11,5	539711 - 3,75x11,5	539411 - 4,3x11,5	539511 - 5,0x11,5
539313 - 3,5x13	539713 - 3,75x13	539413 - 4,3x13	539513 - 5,0x13
539315 - 3,5x15	539715 - 3,75x15	539415 - 4,3x15	539515 - 5,0x15

	Soft (III - IV)	Hard* (I - II)	Fresas							Counter*		
Ø 2.9	2.0	2.4										
Ø 3.5	2.8	3.2										
Ø 3.75	3.2	3.4										
Ø 4.3	3.6	3.8										
Ø 5.0	3.8	4.2										

*Countersink opcional para cortical óssea densa.



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

SLIM



IDEAL PARA ESPAÇOS ESTREITOS, PLATAFORMA PROTÉTICA
MORSE INDEXADA GARANTE ESTABILIDADE E PRECISÃO

Short - 977006
Long - 977007



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica e ápice cônico
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Os implantes Slim Ø2,9 destinam-se a substituir um incisivo lateral na maxila e/ou incisivo central ou lateral na mandíbula
- Conexão Morse Indexada
- Protocolo convencional e carga imediata
- Os implantes Slim Ø2,9 são indicados para restaurações unitárias.

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 2.9

523110 - 2,9x10
523111 - 2,9x11,5
523113 - 2,9x13
523115 - 2,9x15



45N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

FLEX GOLD HE RD



PROJETADO PARA ALCANÇAR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA EM
TODAS AS DENSIDADES ÓSSEAS: MAXILA E MANDÍBULA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Hexágono Externo RD
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 2.0

Roscas duplas compactantes progressivas

- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo

- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.3	Ø 5.0
537385 - 3,5x8,5	518785 - 3,75x8,5	537485 - 4,3x8,5	537585 - 5,0x8,5
537310 - 3,5x10	518710 - 3,75x10	537410 - 4,3x10	537510 - 5,0x10
537311 - 3,5x11,5	518711 - 3,75x11,5	537411 - 4,3x11,5	537511 - 5,0x11,5
537313 - 3,5x13	518713 - 3,75x13	537413 - 4,3x13	537513 - 5,0x13
537315 - 3,5x15	518715 - 3,75x15	537415 - 4,3x15	537515 - 5,0x15

	Soft (III - IV)	Hard*	Fresas								Counter*	
Ø 2.9	2.0	2.4										
Ø 3.5	2.8	3.2										
Ø 3.75	3.2	3.4										
Ø 4.3	3.6	3.8										
Ø 5.0	3.8	4.2										

*Countersink opcional para cortical óssea densa.



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

EASY GRIP HE RD



HEXÁGONO EXTERNO TIPO BRANEMARK,
REGULAR DIÂMETRO

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 2.0

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície **Vulcano Actives**

Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
542785 - 3,75x8,5	542470 - 4,0x7	542570 - 5,0x7
542710 - 3,75x10	542485 - 4,0x8,5	542585 - 5,0x8,5
542711 - 3,75x11,5	542410 - 4,0x10	542510 - 5,0x10
542713 - 3,75x13	542411 - 4,0x11,5	542511 - 5,0x11,5
542715 - 3,75x15	542413 - 4,0x13	542513 - 5,0x13
	542415 - 4,0x15	542515 - 5,0x15

Tratamento de Superfície **Porous**

Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
522785 - 3,75x8,5	522470 - 4,0x7	522570 - 5,0x7
522710 - 3,75x10	522485 - 4,0x8,5	522585 - 5,0x8,5
522711 - 3,75x11,5	522410 - 4,0x10	522510 - 5,0x10
522713 - 3,75x13	522411 - 4,0x11,5	522511 - 5,0x11,5
522715 - 3,75x15	522413 - 4,0x13	522513 - 5,0x13
	522415 - 4,0x15	522515 - 5,0x15



45N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

SHORT HE RD



IDEALIZADO PARA MANDÍBULA COM ALTURA ÓSSEA LIMITADA

Short - 977000
Long - 977001



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 2.0

Principais Indicações

- Implantação preferencialmente múltipla em posterior de mandíbula
- Protocolo convencional e carga imediata
- Pouco osso

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 4.3
56745599 - 4,3x5,5

Ø 5.0
56755599 - 5,0x5,5



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

ZIGOFLAT HE RD



IMPLANTE ZIGOMÁTICO HE PARA PARA PROTOCOLO EM MAXILA ATRÓFICA

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Hexágono Externo RD
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 2.0

Principais Indicações

- Implantação múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação maxila


Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 4.0

501430 - 4.0 x 30
501432 - 4.0 x 32.5
501435 - 4.0 x 35
501437 - 4.0 x 37.5
501440 - 4.0 x 40
501442 - 4.0 x 42.5
501445 - 4.0 x 45
501447 - 4.0 x 47.5
501450 - 4.0 x 50
501452 - 4.0 x 52.5
501455 - 4.0 x 55

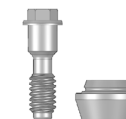

Mini Pilar
2 peças

132321 1,0mm
132322 2,0mm
132323 3,0mm
132324 4,0mm
132325 5,5mm

[Voltar ao Índice](#)

[Componentes](#)

EASY GRIP HE SD



HEXÁGONO EXTERNO SMALL DIÂMETRO

Short - 977006
Long - 977007



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Biplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.8

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula
- Espaços reduzidos

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração

Tratamento de
Superfície **Porous**

Ø 3.3

521310 - 3,3x10

521311 - 3,3x11,5

521313 - 3,3x13

521315 - 3,3x15

Tratamento de
Superfície **Actives**

Ø 3.3

529310 - 3,3x10

529311 - 3,3x11,5

529313 - 3,3x13

529315 - 3,3x15



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente



45N.cm

Torque de Inserção
recomendado

[Voltar ao Índice](#)[Componentes](#)

CONNECT AR HI



HEXÁGONO INTERNO REGULAR DIÂMETRO

Short - 977002
Long - 977003



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.8

Principais Indicações

- Implantação estética unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração



Ø 3.75

513710 - 3,75x10

513711 - 3,75x11,5

513713 - 3,75x13

513715 - 3,75x15

Ø 4.0

513410 - 4,0x10

513411 - 4,0x11,5

513413 - 4,0x13

513415 - 4,0x15

Ø 5.0

513510 - 5,0x10

513511 - 5,0x11,5

513513 - 5,0x13

513515 - 5,0x15



60N.cm

Torque de Inserção
recomendado